

OPTYMUS

El más pequeño y completo de su categoría.

El único Piezo con diferenciales exclusivos en la categoría. Compacto, portátil y fácil de manejar, favorece la vida diaria de los profesionales que valoran la calidad de los procedimientos y la comodidad de sus pacientes.



- Indicadores digitales
- Pieza de mano ergonómica con iluminación LED.
- Bajo nivel de ruido

Potencia



Compacto

- El equipo más pequeño en su categoría
- Fuente interna
- Bomba peristáltica



Pedal Wireless

- Pedal inalámbrico
- Pitido por batería



Movilidad

- Portátil (viene con bolsa personalizada)
- Soporte desconectable
- Bivolt automático



Higienización

- Set de riego autoclavable

• Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia.



ENDODONCIA

ENDODONCIA



PERIODONCIA

PERIODONCIA



ENDODONCIA

ENDODONCIA



PERIODONCIA

PERIODONCIA



CONSERVADORA

CONSERVADORA



PRÓTESIS

PRÓTESIS



ENDODONCIA

ENDODONCIA



PERIODONCIA

PERIODONCIA



CAVITARIO

CONSERVADORA PRÓTESIS



CIRUGÍA

CORTICAL MEDULAR MEMBRANA

Clinical PLUS

Esencial. En todos los sentidos.

El Piezo completo para especialistas en el campo clínico. Esta tecnología brinda a los pacientes previsibilidad, comodidad para los pacientes, procedimientos ágiles, seguros y mínimamente invasivos.

- Actualización de software a través de USB

- Pieza de mano ergonómica con iluminación LED ajustable de 3 niveles.
- Set de irrigación autoclavable



Pedal Wireless

- Cable de pedal desconectable.
- Pitido por batería

- Pantalla táctil de 5"
- menú intuitivo
- Programación automática y manual

- Portátil (opción de bolsa de transporte)
- fuente interna
- Soportes desconectables
- Bivolt automático
- Bajo nivel de ruido

• Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia.

DentSurg PRO

Precisión con alto rendimiento. La evolución de Piezo.

El único Piezo que sirve todas las especialidades. Diseñado para lograr el máximo rendimiento, también permite procedimientos y cirugías clínicas exclusivas con cortes óseos rápidos y precisos, ambos sin dañar los tejidos blandos. Abundan los argumentos para convertirse en un PRO.

- Pieza de mano ergonómica con iluminación LED ajustable de 3 niveles.
- Set de riego autoclavable

- Alto rendimiento de corte

- Actualización de software mediante tarjeta SD

- Pantalla táctil de 7"
- menú intuitivo
- Programación automática y manual


- Portátil (opción de bolsa de transporte)
- Fuente interna
- Soportes desconectables
- Bivolt automático
- Bajo nivel de ruido

• Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia.

EXCLUSIVIDAD DIAMANTE CVD

CVD Diamond (proceso conocido como Deposición Química de Vapor) es una tecnología 100% brasileña, patentada en todo el mundo. Tiene una dureza cercana a la del diamante natural y es 30 veces más duro que el esmalte dental (95GPa VS. 3.3GPa esmalte dental). Su superficie lisa permite procedimientos mínimamente invasivos, sin dañar los tejidos blandos.


Punta de diamante convencional

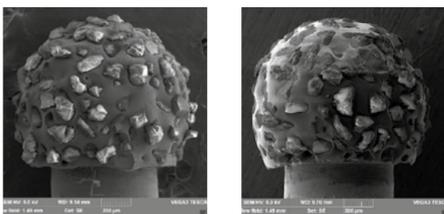

Sin uso

Después de 5 min. de uso

Punta de diamante CVDentus

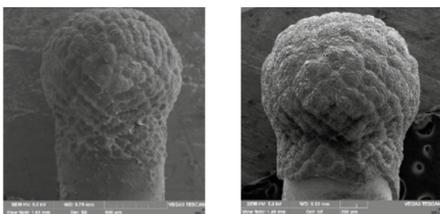

Sin uso

Después de 5 min. de uso

- Polvo de diamante
- 30 veces menos durabilidad que el diamante CVD
- Superficie irregular, con bordes afilados.
- Acabado irregular
- Genera capa de frotis
- Contacto directo con metal.

- Piedra de diamante única
- alta durabilidad
- Superficie homogénea, libre de bordes.
- Acabado superior, homogéneo.
- Genera menos capa de frotis
- Contacto sólo con diamante, biológicamente compatible

Además de la superficie extremadamente lisa, la tecnología CVD permite la granulación controlada en el proceso de producción del diamante, lo que permite el desgaste y los cortes sin dañar el tejido blando. Hay tres tipos diferentes de rugosidad: fina, ultrafina y rugosa.


ULTRA FINO | Ideal para periodoncia, alisar superficies y acabados.

FINO | Preparación de cavidades, terminación de márgenes y preparación para prótesis, carillas y desgaste en general.

RUGOSO | Preparación de cavidades, terminación de márgenes y preparación para prótesis, carillas y desgaste en general.

Puntas clínicas con CVD Diamond

OPTYMUS

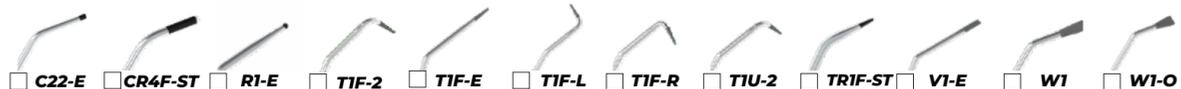

Puntas clínicas de titanio



Puntas clínicas con CVD Diamond

Clinical PLUS

DentSurg PRO



Puntas clínicas de titanio



DLC de puntas quirúrgicas de diamante

DentSurg PRO



Brocas

www.cvdentus.com.br

blog.cvdentus.com.br

/cvdentus

@cvdentus

CVDentus Diamantes



Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 - Torrão de Ouro
12229-840 - São José dos Campos, SP - Brazil
Fone: +55 (12) 3944-1126

CATÁLOGO PIEZOS La solución completa



Innovación,
Rendimiento y seguridad

